

Keramikpolierer • Porcelain Polishers • Polissage de céramique



NTI CeraGlaze

Die Kautschukbindung nimmt während des Poliervorganges Wärme von der Oberfläche weg. So wird eine Überhitzung vermieden. Der NTI CeraGlaze eignet sich auch perfekt für Zirkondioxid.

The rubber binder absorbs the heat from the surface during polishing. This avoids overheating. The NTI CeraGlaze is also ideal for use with zirconia.

Le liant à base de caoutchouc absorbe de la chaleur à partir de la surface lors du processus de polissage. Ainsi, une surchauffe est évitée. Le NTI CeraGlaze est également parfaitement adapté pour la zircone.



Vorpolieren • Prepolishing
retouche et prépolissage

Glätten • Smoothing
polissage

Hochglanzpolieren • High-Shine Polishing
glaçage




Size $\varnothing$ 1/10 mm	050	030	060	100	050	030	060	100	050	030	060	100
L in mm	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7

Shank  3/6/25/100

RA 802 204 ... 243 533 ... 243 533 ... 030 533 ... 304 533 ... 243 523 ... 243 523 ... 030 523 ... 304 523 ... 243 513 ... 243 513 ... 030 513 ... 304 513 ...

REF **P332 P333 P335 P336 P3032 P3033 P3035 P3036 P30032 P30033 P30035 P30036**

opt. green 15,000 rpm, blue 10,000 rpm, yellow 5,000 rpm

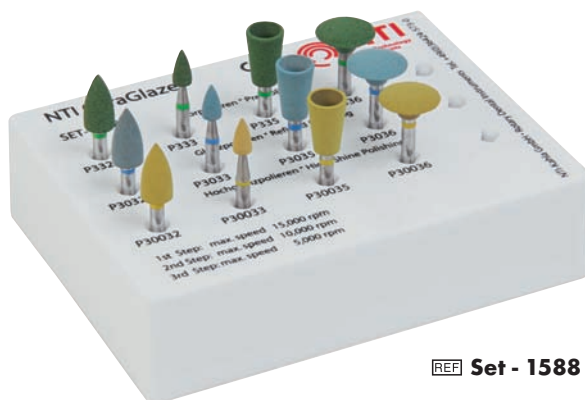

REF **Set - 1588**

- 1 große Flamme
Large flame
Grande flamme
 - anatomische Gestaltung der Höcker
 - anatomical contouring of the cusps
 - Façonnage anatomique des cuspsides
- 2 kleine Spitze
Small point
Petite pointe
 - Fissurengestaltung
 - contouring fissures
 - Façonnage des sillons secondaires
- 3 Kelch
Cup
Cupule
 - flächige Bearbeitung
 - surface polishing
 - Traitement de surface
- 4 Linse
Knife-edge polisher
Lentille
 - interdentale Formgebung
 - interdental shaping
 - Mise en forme interdentaire

Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Korrektur ist überflüssig.
A second glaze firing is not necessary following adjustment.
Une nouvelle cuisson de glaçage après une retouche est superflue.

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift:

Dr. Dörnbrack et. al.:

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass mit den Instrumenten CeraGlaze der Firma NTI die profilometrisch erfassbare Oberflächenqualität des Glanzbrandes erreicht werden kann.“

(al: Prof. Dr. Welker, Prof. Dr. Küpper, Dr. Rzanny Universität Jena)

The approved quality:

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift:

Dr. Dörnbrack et. al.:

„Our results show that, a profilometrical perceivable surface quality, similar to porcelain after a glaze firing can be achieved by using the CeraGlaze instruments from NTI.“

(al: Prof. Dr. Welker, Prof. Dr. Küpper, Dr. Rzanny Universität Jena)

La qualité prouvée:

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift

(Journal allemand pour les dentistes):

Dr. Dörnbrack et. al.:

« Nos résultats montrent que les instruments CeraGlaze de la société NTI réalisent une qualité de surface qui correspond à celle du glaçage au four mesurée d'une manière profilométrique. »

(al: Prof. Dr. Welker, Prof. Dr. Küpper, Dr. Rzanny, Université de Jena)

Keramikpolierer • Porcelain Polishers • Polissage de céramique



NTI CeraWhite

weiss = grobe Körnung
glättet die Oberfläche.

Abrasive, eliminates scratches and smooths the surface.

Gris clair, abrasif, pour le pré-polissage. Elimine les éraflures et rend la surface lisse.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	050	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	10,0

Shank  12/100

RA 658 204... 243 525 ... 030 525 ...

REF **P0352** **P0355**

opt. 15,000 rpm



NTI CeraPink

rosa = mittlere Körnung

erhält die anatomische Struktur der Verblendung und erzeugt einen leichten Glanz.

Pink, provides a gentle finish, retains anatomic structures.

Rose, légèrement abrasif, pour le polissage, maintient la structure anatomique.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	050	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	10,0

Shank  12/100

RA 658 204 ... 243 515 ... 030 515 ...

REF **P0362** **P0365**

opt. 15,000 rpm



NTI CeraSupergrey

grau = Superhochglanz

erzeugt einen natürlichen Glanz an der Oberfläche.

Grey, provides a lustre high-gloss polish.

Pour la céramique, gris pour un brillant naturel sans pâte à polir.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	050
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0

Shank  12/100

RA 658 204... 243 504 ...

REF **P0372**

opt. 15,000 - 20,000 rpm



NTI CeraDia

Besonders harter Keramikpolierer mit integrierter Diamantkörnung.
Abrasive Politur mit sanftem Glanz.

The polisher with diamond impregnation, for abrasive high-gloss polish.

Un polissoir diamanté pour un polissage spéculaire des surfaces céramiques.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	050	030	085	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	7,0	10,0

Shank  6/100

RA 802 204... 243 514 ... 243 514 ... 030 514 ... 030 514 ...

REF **P0332** **P0333** **P0334** **P0335**

opt. 15,000 rpm

Verpackungseinheiten siehe Preisliste

The price list indicates the quantity per package

Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

Beispiel • Example • Exemple:

P332A =  3

P332B =  6

P0400D =  12

P19032E =  25

P332G =  100